



Bedienungsanleitung

Motorroller ADV X-treme mit der App
und dem Smartphone koppeln

1

Bitte betätigen Sie die mittlere Taste unterhalb des Bildschirms.



2

Das Menü wird geöffnet, und Sie navigieren mit der linken Taste zum Menüpunkt „SETTINGS“.



3

Danach betätigen Sie erneut die mittlere Taste.



4

Das Untermenü wird angezeigt, und Sie können den ersten Menüpunkt „Connection“ durch Betätigen der mittleren Taste direkt auswählen und bestätigen.



5

Das folgende Untermenü wird angezeigt, und Sie können den ersten Menüpunkt „BTConnection“ durch Betätigen der mittleren Taste direkt auswählen und bestätigen.




6

Bitte scannen Sie den auf dem Display Ihres Rollers angezeigten QR-Code mit Ihrem Smartphone und öffnen Sie anschließend den Link.



7


Bitte laden Sie diese Anwendung aus dem jeweiligen App-Store herunter.

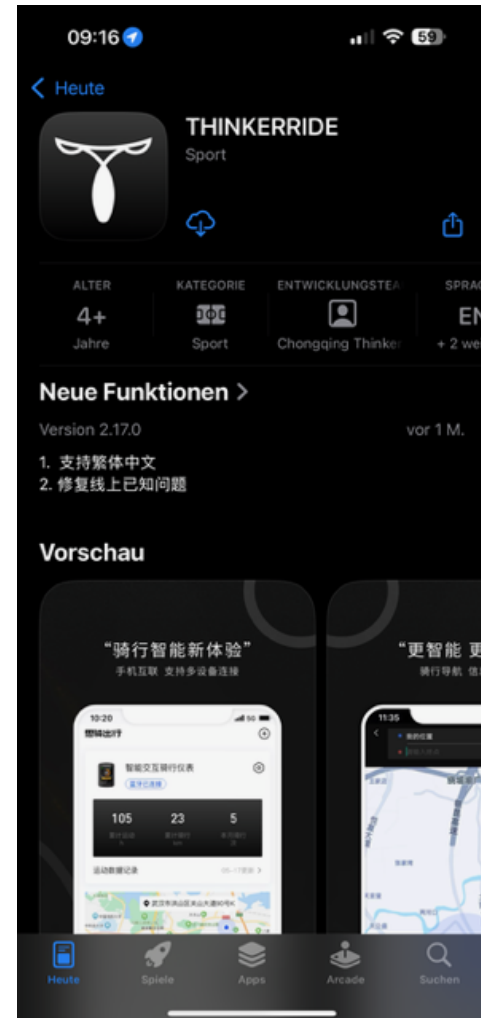

8


Öffnen Sie anschließend die App.
Im Bild ist das Hauptmenü der App dargestellt.

Bitte tippen Sie in der App oben rechts auf „Connect device“ (rot hervorgehoben).

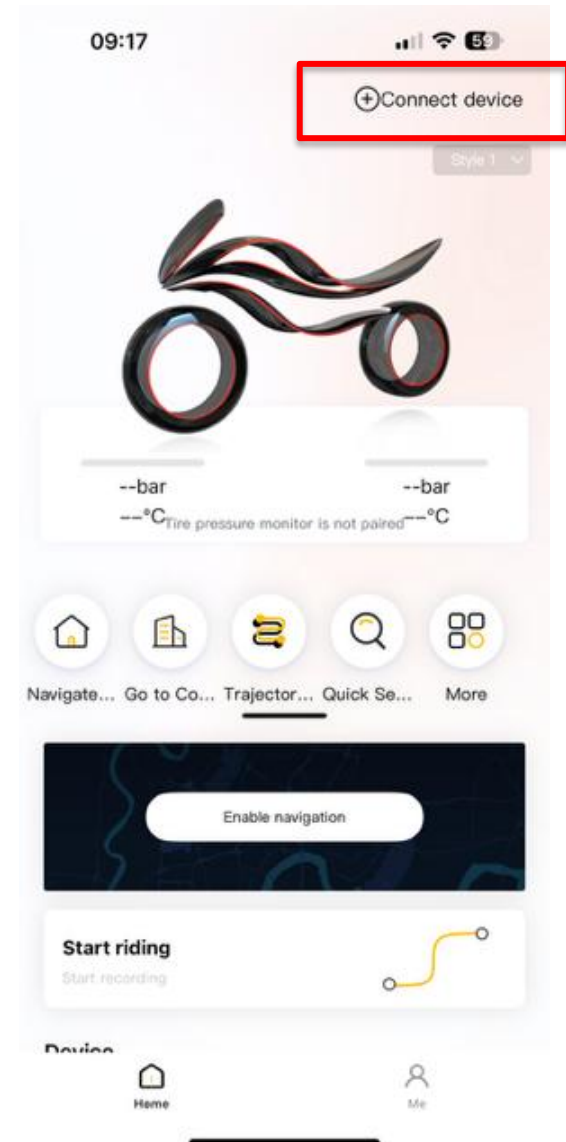

9

Das angezeigte Menü wird geöffnet. Bitte wählen Sie die Option „Sign Up“ aus.

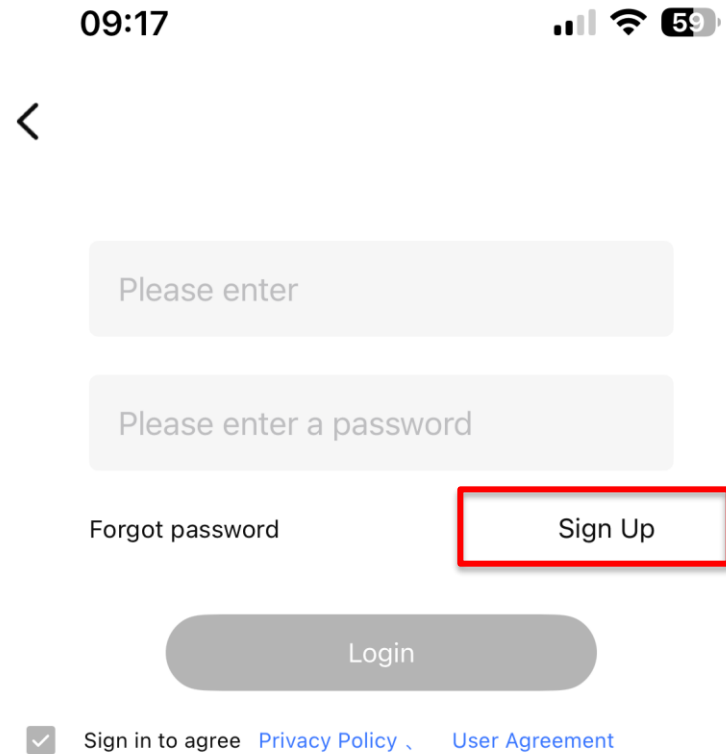

09:17

Signal strength, Wi-Fi, and battery (59%) icons.

<

Please enter

Please enter a password

Forgot password

Sign Up

Login

☒ Sign in to agree [Privacy Policy](#) [User Agreement](#)

The image shows a mobile application interface for user authentication. At the top, the time is 09:17, and there are status icons for signal strength, Wi-Fi, and a 59% battery level. Below the status bar is a back arrow icon. The main form contains two text input fields: the first is labeled 'Please enter' and the second is labeled 'Please enter a password'. Below these fields are two links: 'Forgot password' and 'Sign Up'. The 'Sign Up' link is highlighted with a red rectangular border. Below the links is a large, rounded 'Login' button. At the bottom of the screen, there is a checkbox that is checked, followed by the text 'Sign in to agree' and two links: 'Privacy Policy' and 'User Agreement'.

10

Bitte tragen Sie Ihre E-Mail-Adresse in das vorgesehene Feld ein und vergewissern Sie sich, dass das Kontrollkästchen im rot markierten Bereich („Read to agree“) aktiviert ist. Sobald das Kästchen ausgewählt ist, wird es blau. Danach klicken Sie bitte auf „Get Verification Code“.

09:20

<

Sign Up

Please enter


Get Verification Code

☒ Read in to agree [Privacy Policy](#) [User Agreement](#)



11

Bitte geben Sie den Verifizierungscode, den Sie per E-Mail erhalten haben, in das dafür vorgesehene Feld ein.

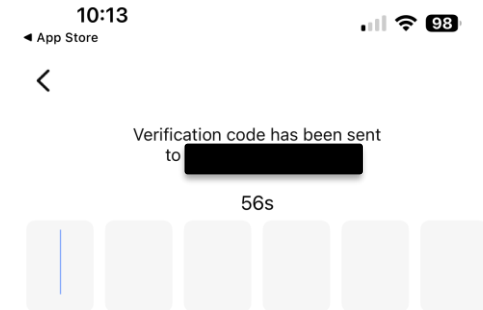

12

Bitte legen Sie ein Passwort fest und geben Sie es im zweiten Feld zur Bestätigung erneut ein.

10:13

◀ App Store

<

Setting password


Please enter 6-16 digits password

Please confirm your password

OK

13

Bitte loggen Sie sich mit Ihrer E-Mail-Adresse und dem von Ihnen festgelegten Passwort ein.
Vergewissern Sie sich vor dem Klicken auf „Login“, dass das Feld „Sign in to agree“ aktiviert ist (der Haken erscheint blau).

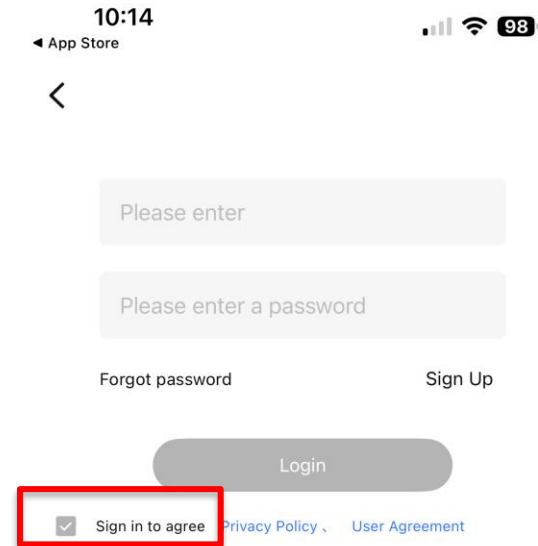

A screenshot of a mobile application's login screen. At the top, the status bar shows the time 10:14, signal strength, Wi-Fi, and battery at 98%. Below the status bar is a navigation bar with a back arrow and the text 'App Store'. The main content area contains two text input fields: the first is labeled 'Please enter' and the second 'Please enter a password'. Below these fields are two links: 'Forgot password' and 'Sign Up'. A large, rounded 'Login' button is centered below the links. At the bottom, there is a checkbox labeled 'Sign in to agree' which is checked with a blue checkmark. To the right of this checkbox are two links: 'Privacy Policy' and 'User Agreement'.

10:14

App Store

Please enter

Please enter a password

Forgot password

Sign Up


Login

☒ Sign in to agree

[Privacy Policy](#) [User Agreement](#)


14

Im Anschluss wählen Sie im Hauptmenü erneut die Option „Connect device“.

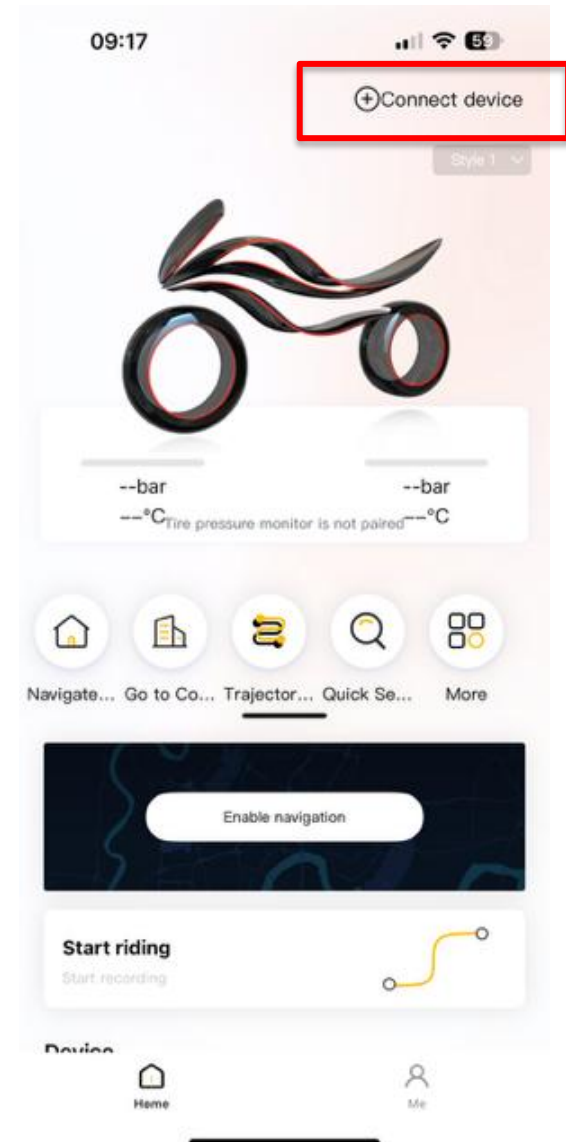


15

Im folgenden Schritt erscheint dieses Fenster. Bitte wählen Sie dort die Option „Bluetooth“ aus.

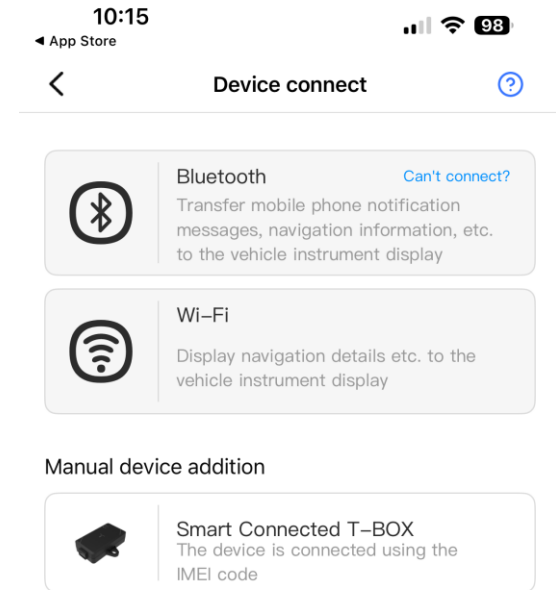


16

Daraufhin wird eine Liste mit verfügbaren Geräten angezeigt. In Ihrem Fall sollte dort Ihr Motorroller erscheinen. Bitte wählen Sie dieses Gerät aus.

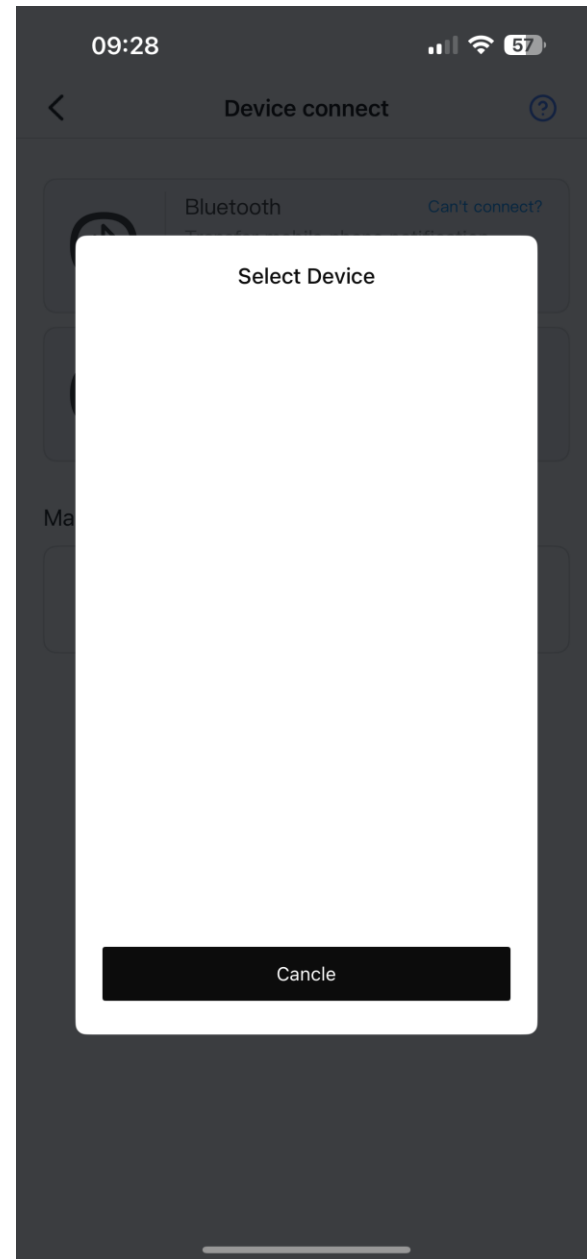

17

Daraufhin wird eine Liste mit verfügbaren Geräten angezeigt. In Ihrem Fall sollte dort Ihr Motorroller erscheinen. Bitte wählen Sie dieses Gerät aus.

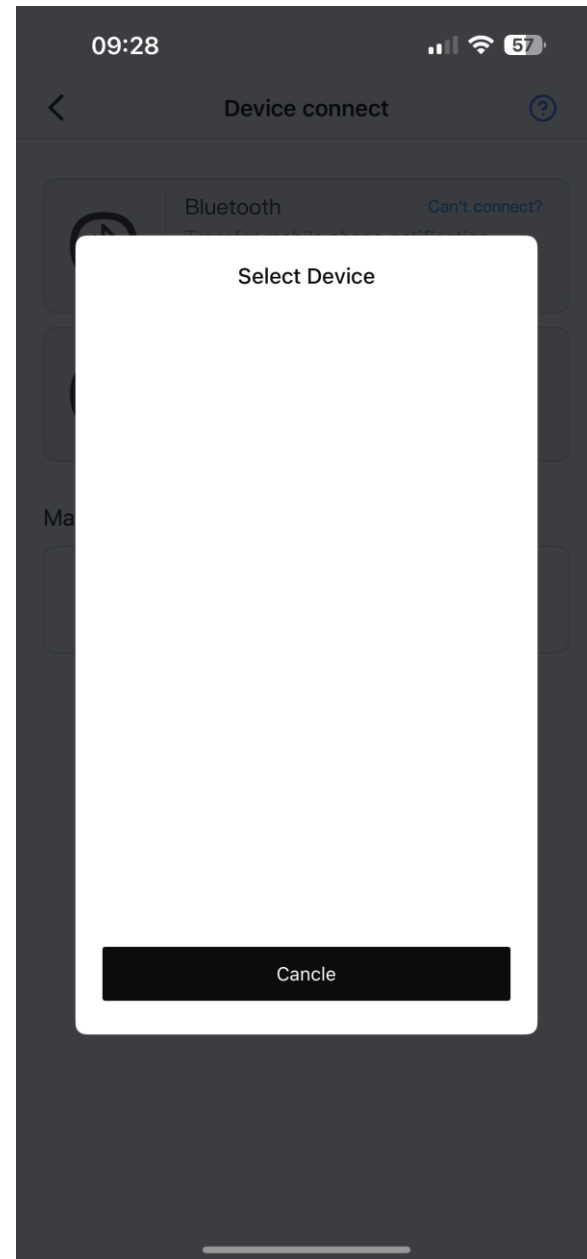

18

Nun ist Ihr Smartphone mit Ihrem ADV X-treme verbunden und die Uhrzeit in Ihrem Display wird aktualisiert.

